

Dette produktet er et dentalt håndstykke tilbehør, som overføringsmedium (luft, vann, elektrisk og optisk) kontakt for høyhastighets luftturbinhåndstykke og slangeforbindelser.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og arkiver for fremtidig referanse.

! Advarsel:

- Les denne bruksanvisningen før bruk for å forstå produktfunksjonene og filen for fremtidig referanse.
- Når du bruker produktet, må du alltid vurdere pasientens sikkerhet.
- Dette produktet tar ikke hensyn til pasientens alder (unntatt spedbarn), kjønn, vekt eller nasjonalitet.
- Dette produktet tar ikke hensyn til operatørens alder (voksen person), høyde, vekt, kjønn eller nasjonalitet.
- Brukere er ansvarlige for driftskontroll, vedlikehold og kontinuerlig inspeksjon av dette produktet.
- Ikke la noen innvirkning på produktet. Ikke slipp produktet.
- Hvis produktet fungerer unormalt, må du slutte å fungere umiddelbart og kontakte forhandleren.
- Ikke bruk syrerikt vann eller steriliseringsløsninger til å tørke, senke eller rengjøre produktet
- Hurtigkobling kan ikke termodesinfektor og sterilisering.
- Produktene leveres i ikke-steril tilstand og må autoklaveres før bruk.
- Utfør regelmessige funksjons- og vedlikeholds kontroller.
- Hvis produktet ikke brukes over en lengre periode, må du kontrollere at det fungerer som det skal før det brukes på en pasient
- For å unngå klinisk nedetid anbefales det at en reserve holdes tilgjengelig i tilfelle et sammenbrudd under operasjonen.




1. Teknisk data

	229(M4)/ 229-1 (B2)	229b(M4)/ 229-1 b (B2)	229-F	229-K	229-GN	229-GW	229-GS	229-GK/ 229-GK1
Tilsvarende produkter	QD-J(NSK)			KaVo MULTiflex 460E	PTL-CL-LED (NSK)	RQ-24 (W&H)	Sirona R / F	KaVa MULHflex LUX465 LED
Monter modeller	Cx2Q7/ CX207-F	CX207-B/ CX207-C/ CX207-W	CX207-F (H25)	H36	CX207-G (N)	CX207-G (W)	CX207-G(8)	CX207-G (K1)
Pære	-	-	-	-	LYSDIODE	-	LYSDIODE	LYSDIODE
Vann adjustor	-	-	-	-	-	-	360° vannjustering	360° vannjusterer
Spenning	-	-	-	-	-	2.9V-3.2V	2.9V-3.2V	2.9V-3.2V
Hull	2hull/ 4hull	2hull/ 4hull	2hull/ 4hull	4hull	6hull	6hull	6hull	6hull

2. Tilkobling og frakobling av håndstykket eller slangen

2-1. Tilkobling



- 1) Hurtigkoblingen settes inn i håndstykkets jekkforbindelser, skyves fremover klemme hurtigkobling;
- 2) Sett håndstykket inn i hurtigkoblingen mens du trekker tilbake festelåsringen på hurtigkoblingen Løsne festelåsringen.
- 3) Forsikre deg om at håndstykket er godt koblet til hurtigkoblingen.
- 4) Sett hurtigkoblingen riktig inn i slangekoblingen og stram slangemutteren (fig).
- 5) Forsikre deg om at hurtigkoblingen er koblet ordentlig til slangen.

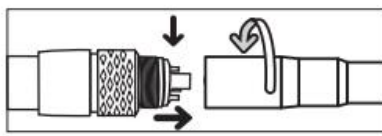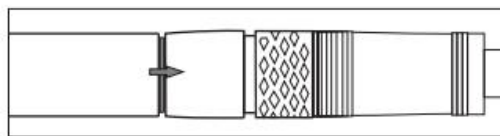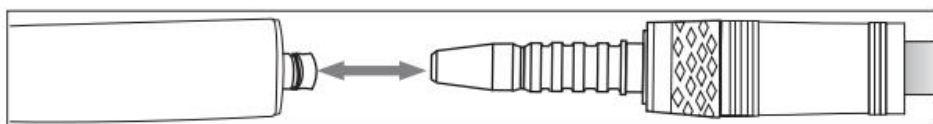

! **Oppmerksomhet: Hurtigkoblingskontakt med skiftenøkkel og slangetilkobling, Stram slangemutterne, bruk en skiftenøkkel chuck hurtigkobling.**

2-2. Frakobling

- 1) Trekk tilbake festelås ringen og fjern håndstykket fra koblingen. (Fig)
- 2) Skru løs hurtigkoblingsmutteren, fjern hurtigkoblingen fra slangen.

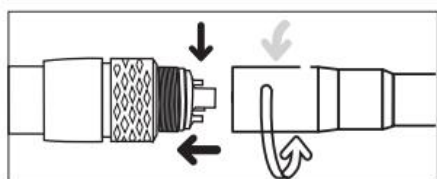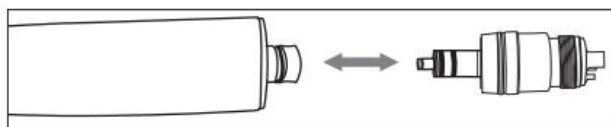

! Advarsel:

- 1) Ikke i operasjonsprosedyren for lasting fjern høyhastighets håndstykke
- 2) Link rask kobling i henhold til modell av håndstykke!
- 3) Må være godt koblet til bruk!

3. Vannjusterer (delvise modeller gjelder)

- 1) med klokken for å redusere vannet;
- 2) mot klokken for å øke vannet.




4. Bytte o-ringene og ikke-Retraksjonsventil

4-1. Bytte ut o-ringene

Slitt eller skadet O-ring kan føre til at luft eller vann lekker.


Når det oppdages vann i avtrekksluften eller vann lekker fra det koblede punktet, byttes O-ringen ut.

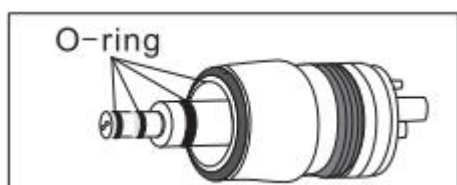

4-2. Bytte ut ikke-tilbaketrekkingsventil (utvalgte modeller gjelder)

For å forhindre orale væsker trukket inn i vannlinjen, har hurtigkobling ikke-tilbaketrekkingsventil, Hvis vann begynner å lekke fra håndstykket, bytt ut ikke-tilbaketrekkingsventil.

- 1) Fjern back-end pakningen.
- 2) Bytt ut ikke-tilbaketrekkingsventil

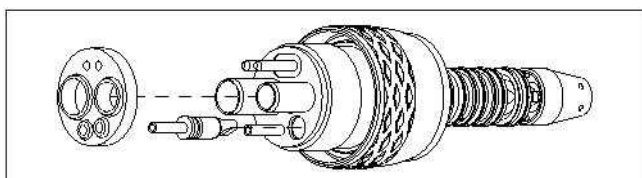



5. Utskifting av lyspære (utvalgte modeller gjelder)

- 1) Koble fra hurtigkoblingen
- 2) Skru av hetten. Fjern den utbrente pæren.
- 3) Bytt ut med en ny. Pass på at pinnene har god kontakt med metallstrimlene.
- 4) Ved dårlig kontakt, hev pinnene (med små, skarpe også jeg) før du plugges.
- 5) Bruk skiftenøkkelen, fjern den gamle LED-pæren, bytt den nye LED-pæren.

⚠ FORSIKTIG:


Utskifting av LED-lysene,

LED-lampen lyser ikke, snu den 180 ° rotasjon installere på nytt.

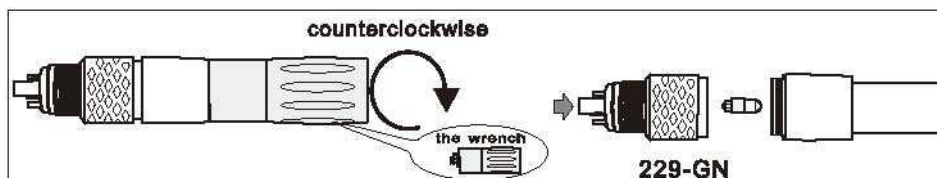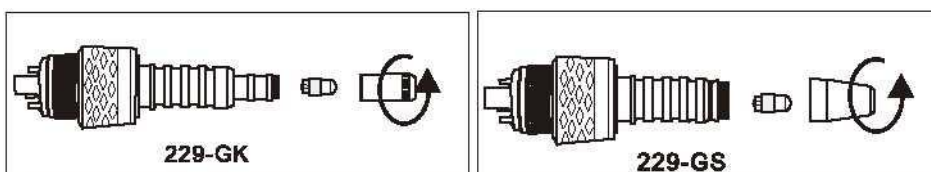

6. Smøring

- 1) Hold hurtigkoblingen, juster dyseinnløpsåpningen etter å ha trykket på injeksjonen; når sprøytetanken må reise seg oppover;
- 2) Injeksjon på ca. 1-2 sekunder

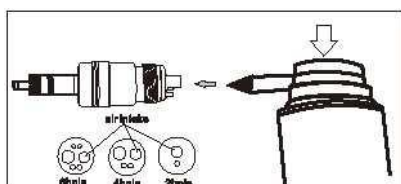

7. Rengjøring og desinfeksjon

- 1) Rengjør og desinfiser hurtigkoblingen umiddelbart etter hver behandling;
- 2) Skyll og børst av under demineralisert vann (<38° C);
- 3) Fjern eventuelle væskerester (absorberende klut, føn med trykkluft)
- 4) Ikke bruk vann med høy syre eller steriliseringsløsninger for å tørke, senke eller rengjøre;
- 5) Hurtigkoblingen er ikke godkjent for desinfeksjon og sterilisering av termovaskemaskiner.

⚠ Advarsel:

Ikke plasser hurtigkoblingen i flytende desinfeksjonsmiddel eller i et ultralydbad!

Hurtigkoblingen er ikke godkjent for sterilisering!

Hurtigkoblingen kan holdes på slangen!

8. Transport og lagring

Oppbevaringstemperatur: -40°C - + 70°C

Driftstemperatur: +10°C +35°C

Relativ fuktighet: 8 % relativ fuktighet – 80 % relativ fuktighet

Lufttrykk: 86kPa-106kPa

VER: 1.0

REV: 2016-9