

EN

Instructions for use

Whitening gel for whitening of discolored teeth, suitable for minimally invasive treatments using customized bleaching trays. Brilliant Smile certified staff can recommend appropriate duration of the treatment. Recommended treatment duration can be found on the syringe.

Fields of Application

- Teeth whitening vital, discolored teeth
- Teeth whitening non-vital teeth
- Whitening of teeth discolored by medication

Contraindications

- Known allergy or intolerance to any of the ingredients
- Pregnancy and lactation

Use

1. Clean the teeth with Dental Cleanser before treatment.
2. Break off the cap on the syringe. Add a small amount of gel in the hollow portion of the bleaching tray or apply evenly directly on the teeth's surface. One syringe is sufficient to fill the two bleaching trays at least two times. Partially filled syringes can be resealed with the broken cap.
3. Do not fill the trays with excessive amounts of whitening gel, as this does not improve or accelerate the whitening process.
4. Insert the bleaching trays in the mouth.
5. Remove any excess gel from your gums or other soft tissue in the mouth.
6. Treatment duration is determined by Brilliant Smile certified staff.
7. Do not eat, drink or smoke while you whiten your teeth.
8. Remove the trays after treatment and clean them thoroughly with warm water and a toothbrush. Dry them thoroughly and keep them in the tray case. Rinse your mouth thoroughly after treatment to remove any gel residue.
9. Continue the treatment as the Brilliant Smile certified staff's prescribes.

After treatment

During treatment and 72 hours after, avoid acidic foods and drinks (cola, citrus drinks and fruit), as these can cause hypersensitivity. Strong colored drinks (coffee, tea, red wine) and food (chocolate, tomatoes, curry, oranges, etc.) and tobacco should also be avoided during the same period of time to avoid

discoloring of the teeth.

Noticeably whiter teeth can usually be seen after approx. 1 week. For persistent stains, the Brilliant Smile certified staff may extend the treatment period further. Depending on the tooth structure and personal habits (consumption of discoloring food, smoking), the result can last for several years. By using Brilliant Smile Whitening toothpaste and mouthrinse, you may extend duration of the results even longer. Treatment may be repeated at a later time without causing any damage to the tooth enamel. You may want to save the bleaching trays after treatment for later use.

Information and Precautions

Dental fillings and crowns, bridges and veneers made of composite or metal are not affected. These can be replaced if needed to match the new whiter teeth. It is advisable to wait for a period of two weeks before such a replacement or restoration.

Potential side effects

In some cases the teeth may become slightly sensitive to hot and cold during treatment and a couple of days after treatment is completed, manifesting in shooting pains and hypersensitivity. Temporary gingival irritation during treatment may also occur if too much gel is used.

These side effects may be minimized, by reducing the amount of bleaching gel or by discontinuing treatment. Please consult Brilliant Smile certified staff if problems persist or if bleaching trays do not fit. White spots on the teeth's surface may temporarily become more visible during treatment and a couple of weeks after. These are caused by transient demineralization and usually disappear again.

Warning

The gel contains hydrogen peroxide, urea peroxide, glycerine, acrylic polymer, potassium nitrate, sodium fluoride and flavorings. Avoid contact with eyes, skin and mucosal tissue. In case of contact, rinse with water. If contact with the eyes occurs, you should consult a doctor as well. Swallowing large amounts of gel may cause heartburn or nausea in susceptible patients.

Storage

Gel syringes should be stored in the refrigerator. Do not freeze syringes. Protect from heat and direct sunlight. Do not use after the expiration date. Keep away from children!

SE

Instruktioner

Blekningsgel för blekning av missfärgade tänder, lämplig för minimalinvasiv behandling med individuellt anpassade blekningskenor. Certifierad personal rekommenderar lämplig behandlingstid. Rekommenderad behandlingstid kan hittas på sprutan.

Användningsområden

- Tandblekning av vitala, missfärgade tänder
- Tandblekning av icke-vitala tänder
- Blekning av tänder som blivit missfärgade av medicinering

Kontraindikationer

- Känd allergi eller intolerans mot något av innehållsämnen
- Graviditet och amning

Användning

1. Rengör tänderna med Dental Cleanser före behandling.
2. Bryt av locket på sprutan. Tillsätt en liten mängd gel i den ihåliga delen av blekningskenan eller applicera jämnt direkt på tändernas yta. En spruta räcker för att fylla båda blekningskenorna minst två gånger. Delvis använda sprutor kan återförslutas med det avbrutna locket.
3. Fyll inte skenorna med för stora mängder gel, eftersom detta inte förbättrar eller påskyndar blekningsprocessen.
4. Sätt i blekningskenorna i munnen.
5. Avlägsna överflödigt gel från tandkötet eller annan mjuk vävnad i munnen.
6. Behandlingstiden bestäms av certifierad personal.
7. Ät, drick eller rök inte medan du bleker dina tänder.
8. Ta ut skenorna efter behandling och rengör dem noga med varmt vatten och en tandborste. Torka dem noggrant och förvara dem i asken. Skölj munnen noggrant efter behandling för att avlägsna eventuella gelrester.
9. Fortsätt behandlingen som enligt certifierad personals föreskrifter.

Efter behandling

Under behandling och 72 timmar efter bör man undvika sura livsmedel och drycker (cola, citrus dryck och frukt), eftersom dessa kan orsaka överkänslighet. Starka färgade drycker (kaffe, te, rött vin) och livsmedel (choklad, tomater, curry, apelsiner, etc.) och tobak bör också undvikas under samma tidsperiod för att undvika missfärgning av tänderna.

Märkbart vitare tänder kan oftast ses efter ca en vecka. För envisa fläckar kan certifierad personal förlänga behandlingsperioden ytterligare. Beroende på tandstrukturen och personliga vanor (konsumtion av missfärgande livsmedel, rökning) kan resultatet vara i flera år. Genom att använda Brilliant Smile Whitening toothpaste och mouthrinse kan du förlänga varaktigheten av resultatet ännu längre. Behandlingen kan upprepas vid ett senare tillfälle utan att orsaka några skador på tandemaljen. Spara blekningskenorna efter behandling för eventuell senare användning.

Information och föreskrifter

Tandfyllningar, kronor, broar och fasader av komposit eller metall påverkas inte. Dessa kan bytas ut om det behövs för att matcha de nya vitare tänderna. Det är klokt att vänta ca två veckor innan man byter ut dem.

Potentiella biverkningar


I vissa fall kan tänderna bli något känsliga för varmt och kallt under behandlingen och ett par dagar efter avslutad behandling, vilket visar sig som ilningar och överkänslighet. Tillfällig tandköttsirritation kan också uppstå under behandlingen om för mycket gel används. Dessa biverkningar kan minimeras genom att minska mängden blekningsgel eller genom att avbryta behandlingen. Rådgör med certifierad personal ifall problemen kvarstår eller om blekningskenorna inte passar. Vita fläckar på tänderna kan temporärt bli mer synliga under behandlingen och ett par veckor efteråt. Dessa orsakas av övergående demineralisering och brukar försvinna igen.

Varning

Gelen innehåller väteperoxid, karbamidperoxid, glycerin, akrylpolymer, kaliumnitrat, natriumfluorid, arömer. Undvik kontakt med ögon, hud och slemhinnor. Vid kontakt, skölj med vatten. Om kontakt med ögonen uppstår bör man även uppsöka läkare. Intag av stora mängder gel kan orsaka halsbränna eller illamående hos känsliga patienter.

Lagring

Gel ska förvaras i kylskåp. Frys inte gelen. Skydda mot värme och direkt solljus. Använd inte efter utgångsdatum. Förvaras oåtkomligt för barn!

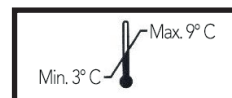

**GEL
SELECTION**

MaxiWhite^{gvo}**FLEX**1-9 h
DAILYHydrogen peroxide 3 %
Carbamide peroxide 9 %FlashWhite^{gvo}**DAY**1-2 h
DAILY

Hydrogen peroxide 6 %

DeepWhite^{gvo}**NIGHT**2-9 h
DAILY

Carbamide peroxide 18 %

NO

Instruksjoner for bruk

Blekegelé til bleking av misfargede tenner, egnet til minimal invasiv behandling med individuelt tilpassede blekeskinner. Sertifisert personale anbefaler egnet behandlingstid. Anbefalt behandlingstid kan finnes på sprøyten.

Bruksområder

- Tannbleking av vitale, misfargede tenner
- Tannbleking av ikke-vitale tenner
- Bleking av tenner som har blitt misfarget av medisiner

Kontraindikasjoner

- Kjent allergi eller intoleranse mot noen av innholdsstoffene
- Graviditet og amming

Bruk

1. Rengjør tennene med Dental Cleanser før behandling.
2. Bryt av lokket på sprøyten. Tilsett en liten mengde gelé i den hule delen av blekeskinnen, eller påfør jevnt direkte på tennenes overflate. En sprøyte er nok til å fylle begge blekeskinnene minst to ganger. Delvis brukte sprøyter kan lukkes på nytt med den brutte toppen.
3. Ikke fyll skinnene med for mye gelé da dette ikke forbedrer eller påskynder blekingsprosessen.
4. Sett blekeskinnene i munnen.
5. Fjern overflødig gelé fra tannkjøttet eller annet mykt vev i munnen.
6. Behandlingstiden bestemmes av sertifisert personale.
7. Ikke spis, drikk eller røyk mens du bleker tennene dine.
8. Ta ut skinnene etter behandling, og rengjør dem grundig med varmt vann og en tannbørste. Tørk dem grundig og oppbevar dem i esken. Skyll munnen grundig etter behandling for å fjerne eventuelle gelérester.
9. Fortsett behandlingen i henhold til forskriftene fra sertifisert personale.

Etter behandling

Under behandling og 72 timer etter bør man unngå syreholdig mat og drikke (cola, sitrusdrikker og frukt), ettersom disse kan forårsake overfølsomhet. Sterkt fargende drikker (kaffe, te, rødvin) og matvarer (sjokolade, tomater, karri, appelsiner osv.) og tobakk bør også unngås i den samme perioden for å unngå misfarging av tennene.

Merkbart hvitere tenner kan oftest ses etter ca. ei uke. For gjenstridige flekker kan sertifisert personale forlenge behandlingsperioden ytterligere. Avhengig av tannstrukturen og personlige vaner (konsumerer av misfargende næringsmidler, røyking) kan resultatet vare i flere år. Ved å bruke BrilliantSmile Whitening tannkrem og overfølsomhet. Midlertidig tannkjøttirritasjon kan også oppstå under behandlingen hvis det brukes for mye gelé.

Informasjon og forskrifter

Tannfyllinger, kroner, broer og fasader av kompositt eller metall påvirkes ikke. Disse kan byttes ut hvis det trengs for å matche de nye hvitere tennene. Det er best å vente ca. to uker innen man bytter dem ut.

Potensielle bivirkninger

I visse tilfeller kan tennene bli litt følsomme for varme og kulde under behandlingen og et par dager etter avsluttet behandling, noe som viser seg som isninger og overfølsomhet. Midlertidig tannkjøttirritasjon kan også oppstå under behandlingen hvis det brukes for mye gelé.

Disse bivirkningene kan minimeres ved å redusere mengden blekegelé eller ved å avbryte behandlingen. Rådfør deg med sertifisert personale dersom problemene vedvarer eller derom blekeskinnene ikke passer. Hvide flekker på tennene kan forbigående bli mer synlige under behandlingen og et par uker etter. Dette skyldes forbigående demineralisering og pleier å forsvinne igjen.

Advarsel

Geléen inneholder hydrogenperoksid, karbamidperoksid, glycerin, akrylpolymere, kaliumnitrat, natriumfluorid, smaksstoffer. Unngå kontakt med øyne, hud og slimhinner. Ved kontakt, skyll med vann. Hvis det oppstår kontakt med øynene, bør man oppsøke lege. Inntak av store mengder gelé kan medføre halsbrann eller utilpasshet hos følsomme pasienter.

Oppbevaring

Gelé skal oppbevares i kjøleskap. Ikke frys geléen. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Må ikke brukes etter siste holdbarhetsdato. Oppbevares utilgjengelig for barn!

DK

Anvisning

Blekegelé til bleking av misfargede tenner, egnet til minimal invasiv behandling med individuelt tilpassede blekeskinner. Sertifisert personale anbefaler egnet behandlingstid. Anbefalt behandlingstid kan finnes på sprøyten.

Bruksområder

- Tandblegning av vitale, misfargede tenner
- Tandblegning av ikke-vitale tenner
- Blegning av tenner som er blevet misfarget via medicin

Kontraindikasjoner

- Kendt allergi eller intoleranse mod nogle af indholdsstofferne
- Graviditet og amning

Anvendelse

1. Rengjør tænderne med Dental Cleanser før behandling.
2. Fjern låget på sprøjten. Tilsæt en lille mængde gelé i den hule del af blegeskinne, eller påfør et jævnt lag direkte på tændernes overflade. En sprøjte er nok til at fylde begge blegeskinner mindst to gange. Delvist anvendte sprøjter kan lukkes på ny med den brudte top.
3. Fyld ikke skinnerne med for meget gelé, da dette ikke forbedrer eller fremskynder blegningsprosessen.
4. Sæt blegeskinne i munden.
5. Fjern overflødig gelé fra tandkødet eller andet blødt væv i munden.
6. Behandlingstiden afgøres af certificeret personale.
7. Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du bleger dine tænder.
8. Ta' skinnerne ud efter behandling, og rengør dem grundigt med varmt vand og en tandbørste. Tør dem grundigt og opbevar dem i æsken. Skyl munden grundigt efter behandling for at fjerne eventuelle gelérester.
9. Fortsæt behandlingen i henhold til forskrifterne fra certificeret personale.

Efter behandling

Under behandling og 72 timer efter bør du undgå syreholdig mad og drikke (cola, citrusdrik og frugt), da disse kan forårsage overfølsomhed. Stærkt fargede drikke (kaffe, te, rødvin) og madvarer (chokolade, tomater, karri, appelsiner osv.) samt tobak bør også undgås i den samme periode for at undgå misfarging af tænderne.

Mærkbart hvidere tænder kan oftest ses efter cirka 1 uge. Når det gælder varige pletter, kan certificeret personale forlænge behandlingsperioden. Afhængig af tandstrukturen og personlige vaner (indtagelse af misfargende næringsmidler og ved rygning) kan resultatet vare i flere år. Ved at anvende BrilliantSmile Whitening tandcreme og mundskyl kan du forlænge varigheden af resultatet yderligere. Behandlingen kan gentages en anden gang, uden at det forårsager skader på tandemaljen. Gem blegeskinne efter behandling for eventuel senere brug.

Information og forskrifter

Tandfildninger, kroner, broer og facader eller metal påvirkes ikke. Disse kan udskiftes, hvis der er brug for at matche de nye hvidere tænder. Det er bedst at vente cirka to uger, inden man udskifter dem.

Potentielle bivirkninger

I nogle tilfælde kan tænderne blive følsomme over for varme og kulde under behandlingen og et par dage efter afsluttet behandling, hvilket kan vise sig som isninger og overfølsomhed. Midlertidig tandkødsirritation kan også opstå under behandlingen, hvis der anvendes for meget gelé. Disse bivirkninger kan minimeres ved at reducere mængden af blekegelé eller ved at afbryde behandlingen. Rådfør dig med certificeret personale, hvis problemerne er vedvarende - eller hvis blegeskinne ikke passer. Hvide pletter på tænderne kan kortvarigt blive mere synlige under behandlingen og et par uger efter. Dette skyldes forbigående demineralisering og plejer at forsvinde igen.

Advarsel

Geléen indeholder hydrogenperoxid, karbamidperoxid, glycerin, akrylpolymere, kaliumnitrat, natriumfluorid og smagsstoffer. Undgå kontakt med øjne, hud og slimhinder. Ved kontakt med øjnene, skyl med vand. Hvis der opstår kontakt med øjnene, bør man opsoge læge. Indtagelse af store mængder gelé kan medføre halsbrand eller utilpashed hos følsomme patienter.

Oppbevaring

Gelé skal oppbevares i kjøleskap. Geléen må ikke fryses og skal beskyttes mot varme og direkte sollys. Må ikke anvendes efter sidste holdbarhetsdato. Oppbevares utilgjengelig for barn.

FI

Käyttöohjeet

Valkaiseva geeli värjätynneiden hampaiden valkaisuun. Tuote sopii minimaalisen invasiivisiin hoitoihin, joissa käytetään asiakaskohtaisia valkaisuokaukaloita. Brilliant Smile -sertifioitu henkilökuunta voi suositella sopivaa hoidon kestoa. Suositeltu hoitoaika löytyy ruiskusta.

Käyttöalueet

- Vitaalien, värjätynneiden hampaiden valkaisu
- Ei-vitaalien hampaiden valkaisu
- Lääkityksen värjäämien hampaiden valkaisu

Kontraindikaatiot

- Tiedetty allergia tai intoleranssi jollekin ainesosalle
- Raskaus ja imetys

Käyttö

1. Puhdista hampaat Dental Cleanserilla ennen hoitoa.
2. Riko ruiskun korkki. Lisää pieni määrä geeliä valkaisuokaulon onttoon osaan tai levitä tasaisesti suoraan hampaiden pinnalle. Yksi ruisku riittää täyttämään kaksi valkaisuokauloa vähintään kaksi kertaa. Osittain täytetyt ruiskut voidaan sulkea uudelleen rikutulla korkilla.

3. Älä täytä kaukaloihin liikaa valkaisuageeliä, koska tämä ei paranna tai nopeuta valkaisu prosessia.
4. Aseta valkaisuokaulot suuhun.
5. Poista ylimääräinen geeli ikenistä tai muista suun pehmytkudoksista.
6. Brilliant Smile -sertifioitu henkilökuunta määrittelee hoidon keston.
7. Älä syö, juo tai tupakoi hampaiden valkaisuun aikana.
8. Poista kaukalot hoidon jälkeen ja puhdista ne huolellisesti lämpimällä vedellä ja hammasharjalla. Kuivaa kaukalot huolellisesti ja säilytä kotelossa. Huuho suu huolellisesti hoidon jälkeen, jotta geelin jäämät poistuvat.
9. Jatka hoitoa Brilliant Smile -sertifioidun henkilökuunnan määräämällä tavalla.

Hoidon jälkeen

Hoidon aikana ja 72 tuntia sen jälkeen välttä happamia ruokia ja juomia (kolaa, sitruksjuomia ja -hedelmiä), koska nämä voivat aiheuttaa yliherkkyyttä. Tämän aikaa tulee myös välttää voimakkaan värisiä juomia (kahvi, tee, punaviini) ja ruokia (suklaa, tomaatit, curry, appelsiinit jne.) sekä tupakkaa, jotta hampaat eivät värjäynty. Hampaista tulee näkyvästi valkoisemmat yleensä noin 1 viikon kuluessa. Jos hampaissa on sitkeitä värjäytymiä, Brilliant Smile -sertifioitu henkilökuunta voi pidentää hoitoaika. Hampaiden rakenteesta ja henkilökohtaisista tavoista (värjäävien ruokien nauttimisesta, tupakkoinnista) riippuen lopputulos voi kestää useita vuosia. Käyttämällä Brilliant Smile Whitening hammastahnaa ja -suuvettä, voit pidentää kestoakaa entisestään. Hoito voidaan toistaa myöhemmin vahingoittamatta hammaskiillettä. Valkaisuokaulot kannattaa säästää hoidon jälkeen myöhempää tarvetta varten.

Tiedot ja varoitukset

Valkaisu ei vaikuta komposiittia tai metallia oleviin hampaiden täytteisiin sekä kruunuuihin, siltoihin ja pinnoitteisiin. Nämä voidaan vaihtaa, jos niiden halutaan sopivan uusiin valkoisempiin hampaisiin. Kannattaa odottaa kaksi viikkoa ennen vaihtoa tai restauraatiota.

Mahdolliset sivuvaikutukset

Joissakin tapauksissa hampaat saattavat hieman herkistyä kuumalle ja kylmälle hoidon aikana ja pari päivää hoidon jälkeen, mikä tuntuu vihlointana ja yliherkkyytenä. Ikenet saattavat myös ärsyntyä tilapäisesti hoidon aikana, jos siinä käytetään liikaa geeliä. Nämä sivuvaikutukset voidaan minimoida vähentämällä valkaisuageelin määrää tai keskeyttämällä hoito. Ota yhteyttä Brilliant Smile -sertifioituun henkilökuuntaan, jos ilmenee ongelmia tai jos valkaisuokaulot eivät sovi. Valkoiset pisteet hampaiden pinnassa saattavat tulla tilapäisesti näkyvämmiksi hoidon aikana ja pari viikkoa sen jälkeen. Nämä johtuvat tilapäisestä demineralisaatiosta ja häviävät tavallisesti.

Varoitus

Geeli sisältää vetyperoksidia, ureaperoksidia, glyseriiniä, akryylipolymeeriä, kaliumnitraattia, natriumfluoridia ja aromeja. Vältä aineen joutumista silmiin, iholle ja limakalvoille. Jos ainetta joutuu näihin, huuho vedellä. Jos ainetta joutuu silmiin, ota myös yhteyttä lääkäriin. Suurten geelimäärien nieleminen voi aiheuttaa närästystä tai pahoinvointia herkillä potilailla.

Säilytys

Geeliruiskut pitää säilyttää jääkaapissa. Älä pakasta ruiskuja. Suojaa lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta!

