



Disse bruksanvisningene refererer til følgende punkter:

Blandeputer Slitesterk spesialpapir	60 ark	40 ark	25 ark	35 ark
REF	80800	80801	80802	80803
Størrelse	universell (u)	liten (a)	medium (b)	stor (c)
Dimensjoner	7,0 x 8,0 cm	3,5 x 4,5 cm	12,5 x 18,0 cm	15,0 x 24,0 cm
Emballasjeenhet	10 blokker	10 blokker	10 blokker	5 blokker



Sklisikre blandeputer Sklisikker underside	60 ark	25 ark	35 ark
REF	80820	80822	80823
Størrelse	universell (u)	medium (b)	stor (c)
Dimensjoner	7,0 x 8,0 cm	12,5 x 18,0 cm	15,0 x 24,0 cm
Emballasjeenhet	10 blokker	10 blokker	5 blokker

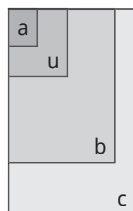

Pergamentblandeputer Slitesterk pergamentpapir	75 ark	75 ark	75 ark
REF	80950	80951	80952
Størrelse	liten (d)	medium (e)	stor (f)
Dimensjoner	4,0 x 4,0 cm	7,0 x 10,0 cm	14,0 x 20,0 cm
Emballasjeenhet	10 blokker	10 blokker	10 blokker

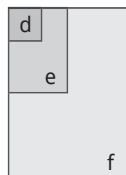

Sklisikre filmblokker Sklisikker underside	100 ark	100 ark
REF	80830	80834
Størrelse	universell (u)	stor (g)
Dimensjoner	7,0 x 8,0 cm	8,0 x 14,0 cm
Emballasjeenhet	1 blokkere	1 blokkere

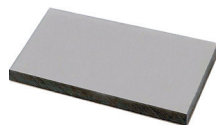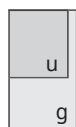

Blandeputer Matt overflate	40 ark
REF	80811
Størrelse	liten (a)
Dimensjoner	3,5 x 4,5 cm
Emballasjeenhet	12 blokker

**REF**

80812, 80826, 80829, 80840, 80845, 80870, 80871, 80872, 80873, 80874, 80875, 80876, 80877, 80901, 80902, 80903, 80930, 80931, 80932, 80939, 80940, 80941, 80942, 80943, 80944, 80945, 80946, 80955, 80956, 80960, 80961, 80962, 80970, 80971, 80972, 80973, 80974, 80975, 81800, 81802, 81803

133645, 144114, 144115, 147667, 147684, 147685, 185744, 185968, 185969, 209927, 239720, 2820045, 2820050, 2820055, 2820110, 2820220, 2820245,

2500440, 2500441, 2500443,

496531, 496542, 498044, 498099, 498102, 500209, 500323, 500334,

5-639, 5-640, 5-641, 5-642, 5-698, 5-699,

704180, 704188, 704203, 704207, 704212, 704215, 7042218, 7042219,

7071, 7072, 7073, 7074,

90485, 90490,


CTB015, CTC050, CTC051, CTD021, CTM051, CTM052, CTP011,

PFU105, PSP18050


Referansenummer kan være fra varenr. avviker fra forhandleren. Bruk forhandlerens nummer når du bestiller på nytt.




- 1** Påføring av de enkelte komponentene: Påfør komponentene på det øvre arket på blandeputen i henhold til produsentens instruksjoner.

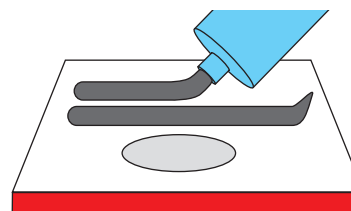

- 2** Blanding av komponentene: Bland komponentene i henhold til produsentens anvisninger til en homogen masse oppnås.

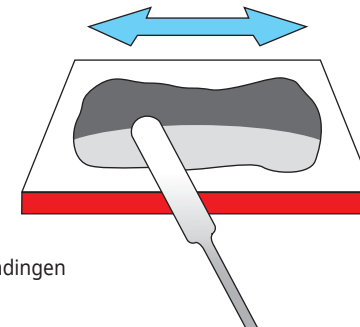

- 3** Fjerne blandingen: Du kan nå fjerne den ferdige blandingen fra mikseputen for videre behandling.

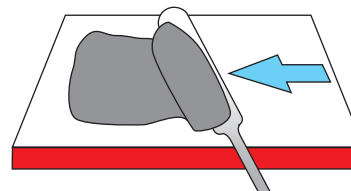

- 4** Avhending: Riv det brukte arket fra puten og kast det i søpla.

Tiltenkt bruk

Blandeputene brukes til manuell blanding av forskjellige komponenter av tannlegesement, kompositter eller avtrykksmateriale i tannlegepraksis. Blandingsputens engangssider for engangsbruk fungerer som en overflate som de enkelte komponentene påføres på. Etter blanding på blandeputen kan materialet brukes direkte fra blandeputen.

Ytelsesdata


Engangsbruk av produktet reduserer risikoen for krysskontaminering mellom forskjellige applikasjoner eller pasienter sammenlignet med flerbruksprodukter (f.eks. Aluminiums- eller glassplater) og sparer tid (rengjøring av flerbruksprodukter) på tannlegekontoret.

Den glatte, vann- og fettresistente overflaten forhindrer at komponentene trekkes inn i blandeputen. Multilimingen sikrer høy stabilitet.

Instruksjoner for sikker bruk av produktet *

- Medisinsk utstyr kan bare brukes av (opplært) tannlegepersonell.
- Bruk hansker under bruk.
- Bruk et nytt blandingspute for hver bruk.
- Kast det brukte arket etter hver bruk.
- Blandeputene er produkter for engangsbruk. Hvis produktet (enkeltark) brukes flere ganger, kan krysskontaminering og blanding av forskjellige tannlegement, kompositter eller avtrykksmaterialer forekomme. I dette tilfellet kan egenskapene til blandingen ikke garanteres.
- Ikke bruk et skadet eller skittent ark.
- Oppbevar produktet på et mørkt og tørt sted mellom 5 og 35 °C.

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med produktet må rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i ditt land.

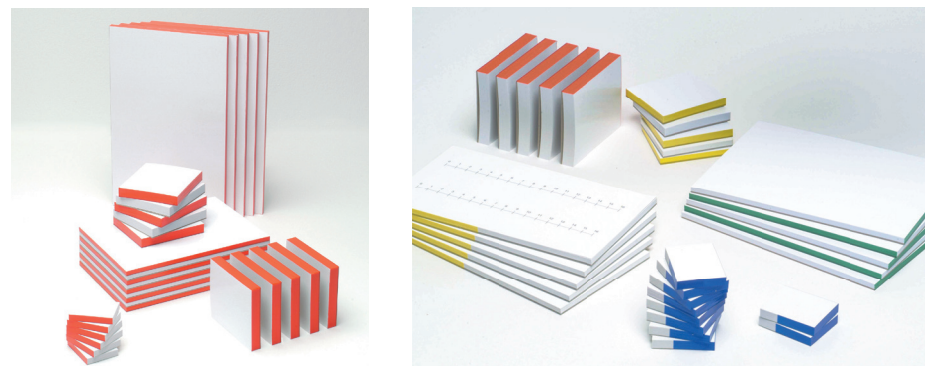

Symbolbetegnelse - Forklaring av symbolene som brukes på emballasje og merking i henhold til EUs medisinske utstyrsstandard DIN EN ISO 15223-1:2022-02

	Se bruksanvisningen	REF	Katalog eller modellnummer
	Ikke bruk igjen	LOT	Batchkode
	Ikke steril	MD	Medisinsk enhet
	Holdes borte fra sollys	UDI	Unik enhetsidentifikator
	Hold deg tørr		Antall blokker
	EXP		Antall ark
	Lagringstemperaturområde	CE	CE-merking av samsvar
	Produsent		

*Litteratur: ¹⁾Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene¹ - Mitteilung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz 2006, 49, S1-16, <http://www.bonath-dental.com/RKI-Zahnmedizin2006.pdf>

²⁾Hygienestandard der Zahnarztpraxen in Greifswald nach Publikation der RKI-Richtlinie 2006 im Vergleich zum Hygienestandard in Greifswald und Magdeburg, S. Handrup - 2011

